

层流洗涤™ HT2000 系统

Laminar Wash™ HT2000 System



更温和

告别离心产生的机械压力，轻柔的层流洗涤™能有效维持细胞活性。

更高效


自动化流程，19步手动操作，自动化1步完成。

更准确

细胞保留率更高，适用于TILS和数量较少的细胞群。

流式前处理 自动化解决方案

层流洗涤™能够精细区分肿瘤浸润淋巴细胞（TIL）亚群

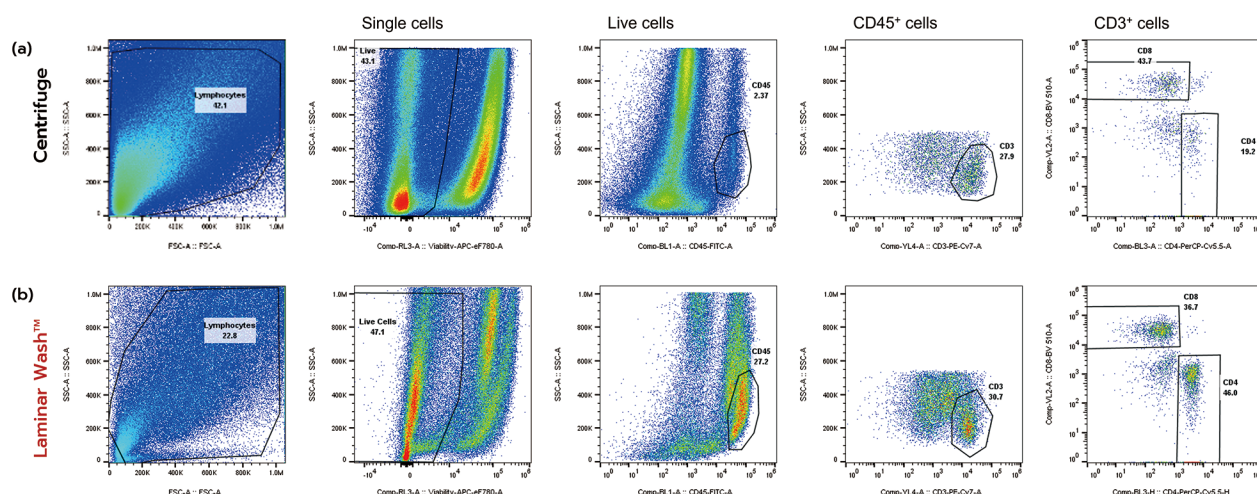


(a) 离心方法

通过重悬与离心的交替进行清洗，会造成细胞丢失和机械损伤。


(b) 层流洗涤™方法

细胞碎片更少，TIL保留率更高，且种群分辨率更高。

离心洗涤方法

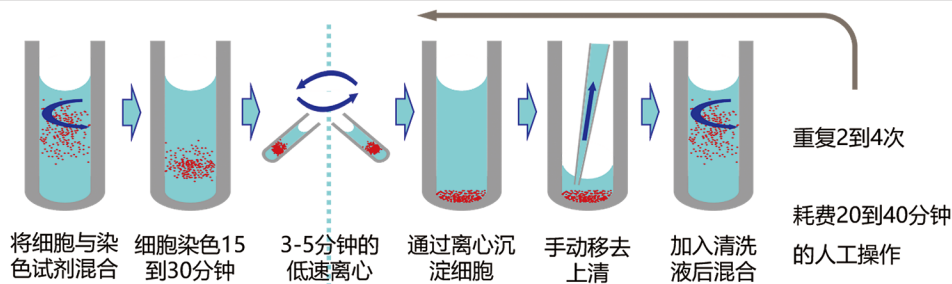

层流洗涤方法

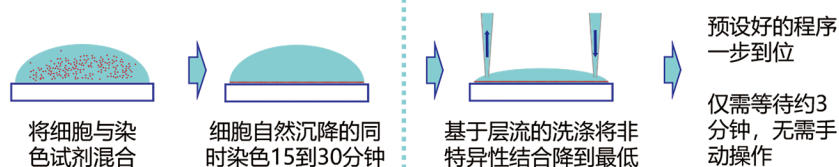


解放双手

节约时间

自动化1步解决
19个手动操作步骤

配置参数

名称	层流洗涤™ HT2000 系统	电压	100-240V
英文名称	Laminar Wash™ HT2000 System	功率	24V/3.0A
型号	HT2000	尺寸	31.0 (H) × 26.2 (W) × 30.2 (D) cm
货号	DC-2000-96-01	重量	14kg

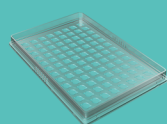

层流洗涤孔板



MINI系统



AUTO 1000系统



层流洗涤™原理



扫码关注